

Schnellstart Anleitung CCM3A-2214-EU-LEAD


Care Call Universal Sender mit Netzkabel




Aktivierungs Möglichkeiten

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Der Sender kann durch das Einstecken einer Druckmatte in den dafür vorgesehenen Anschluß, durch Einschalten des Geräuschmelders oder beides aktiviert werden.

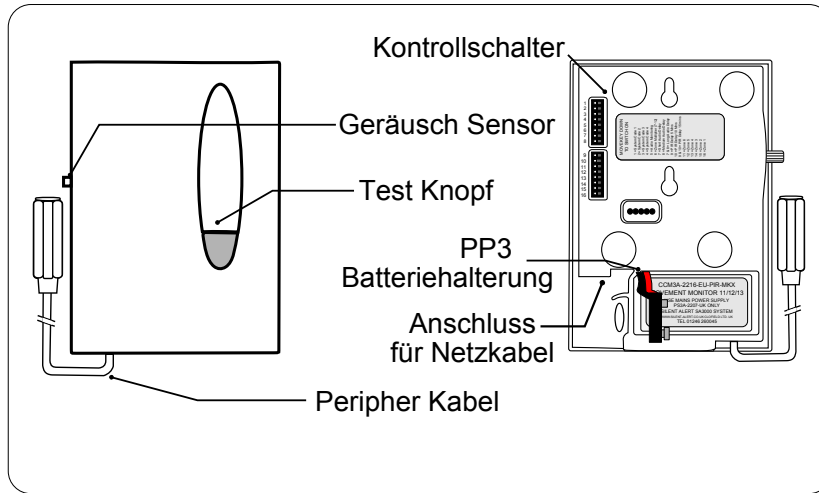


1. Bewegen Sie Schalter 16 nach rechts. Legen Sie eine 9 Volt Alkali Batterie in die Batteriehalterung ein.

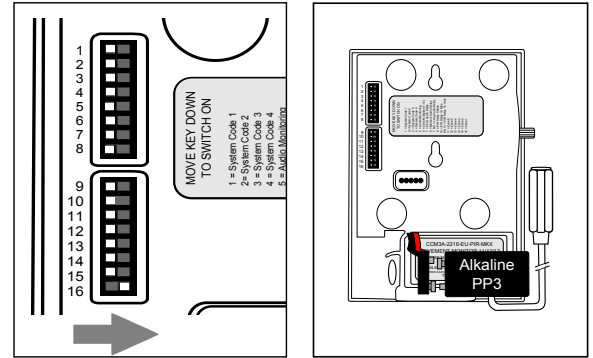


Peripher Aktivierung

Der Universal Sender ist mit der PM2 Alarmtrittmatte, PM5 Stuhlaufgabe und dem Jelly Bean Schalter kompatibel.

2. Stecken Sie den Stecker der Druckaufgabe PM5 in die Anschlussstelle am Melder.

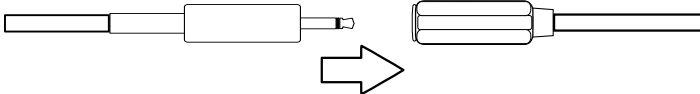

Falls nötig kann diese Verbindung auch zur Sicherheit mit Klebeband umwickelt werden.

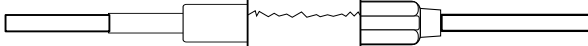


Beim ersten Mal, wenn die Verbindung besteht, kann es sein, dass der Alarm ausgelöst wird. Das ist normal.

Der Sender sendet ein Signal an den Pager oder SignWave Empfänger wenn der Benutzer auf die Alarmtrittmatte steigt.

Alternativ kann auch ein Druckknopf oder ein Schwesternrufknopf angeschlossen werden.

Wenn dieser Knopf an den Universal Sender angeschlossen ist, wird jedes Mal ein Signal gesendet, wenn der Knopf betätigt wird.

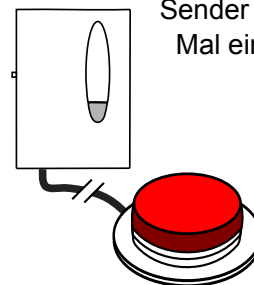


Der Sender kann von jedem Gerät, das eine voltfreie Abkürzung in eine 3,5mm Klinkenbuchse darstellt, ausgelöst werden.

Bitte kontaktieren Sie uns falls Sie mehr Information benötigen.

Geräuschmelder aktivieren


Ideal zur Überwachung von Türsprechanlagen und kabellosen Türklingeln. Es können auch Zeitverzögerungen bei der Geräuschüberwachung eingeschaltet werden, um falschen Alarm zu verhindern, wenn z. B. eine Tür zuschlägt.

1. Bewegen Sie Schalter 5 & 7 nach rechts.

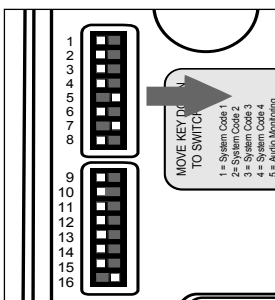


2. Drehen Sie den Geräuschsensor an der Seite des Bewegungsmelders eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn, bis der Schlitz horizontal steht.

Platzieren Sie den Geräusch Sensor nahe der zu überwachenden Geräusch Quelle.

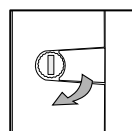


Mehr empfindlich

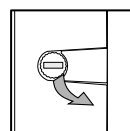

Weniger empfindlich


3. Der Test Knopf leuchtet orange wenn ein Geräusch wahrgenommen wird und schaltet auf grün um wenn die Zeitverzögerung überschritten wird. Mit den Schaltern 7 & 8 können Sie die Zeitverzögerungseinstellungen verändern.

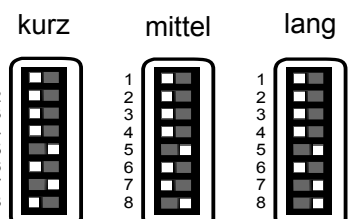

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Ereignis Einstellungen

Der Sender kann so kodiert werden das jedes beliebige Ereignis Symbol am Pager oder SignWave erleuchtet wird. Die Abbildung unten zeigt die relevanten Tasten Einstellungen von eins bis sechs.

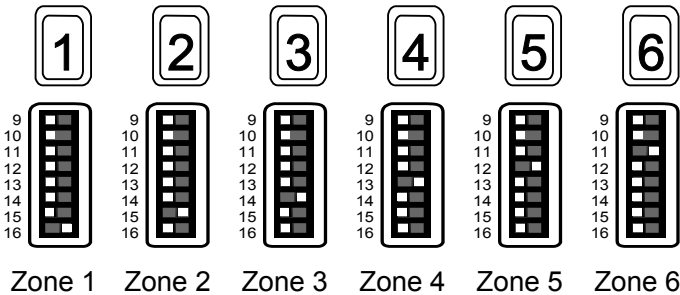


Die Zonen 7 bis 12 werden angezeigt indem die Taste mit der entsprechenden Nummer und die Batterietaste (+6) aufleuchten.

Um dieses Feature zu nutzen, bewegen Sie Schalter Nr.6 und einen der Zonenschalter nach rechts.

Zone 7 wird also durch Zone 1 plus die Batterietaste angezeigt.

Zone 8 wird durch Zone 2 plus Batterietaste angezeigt und so weiter.

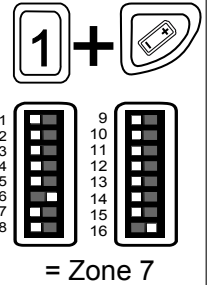

So wechseln Sie den Kanal

Anmerkung: In den meisten Fällen ist es nicht nötig den Kanal zu wechseln. Wenn allerdings ein oder mehrere weitere Care Call Systeme in der Nähe sind, ist es möglich den Kanal (bis zu 16 versch. Kanäle) zu wechseln um Störungen zu verhindern.

Der Sender hat den Kanal 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den Sender jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Kanäle können mit den Schaltern 1-4 eingestellt werden. Die Abbildung zeigt die 16 möglichen Kombinationen.

Stellen Sie sicher dass am Empfänger (Pager oder SignWave) und anderen Sendern des Systems der gleiche Kanal eingestellt ist.

