


Schnellstart Anleitung CCF3A-2219-EU / GFOB

Care Call Notfall Personenrufsender mit Erschütterungserkennung




Standard Aktivierung

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

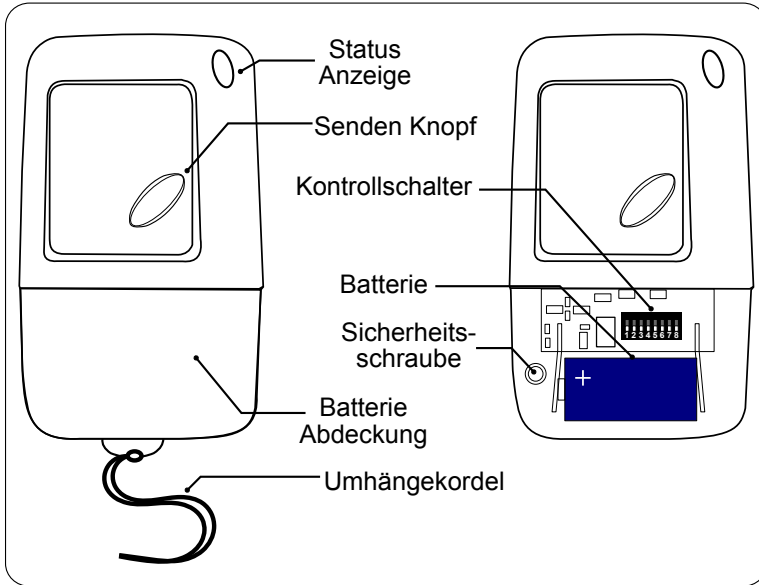


1. Die Batterie ist bereits eingelegt im Schlüsselanhänger.

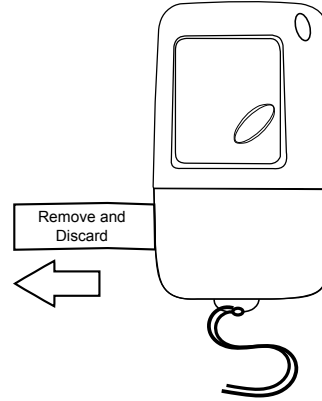

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, ziehen Sie einfach den Batteriestreifen vorsichtig weg.

Der Personenrufsender ist nun bereit zum Einsatz und so eingestellt, dass das Personensymbol aufleuchtet.

2.

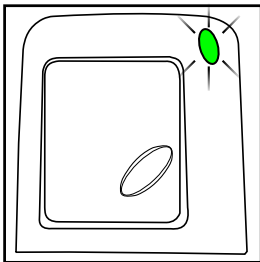


Senden eines Signals


Die bereits eingesetzte Lithium Batterie sollte für viele Benutzungen ausreichen.

Drücken Sie den Senden Knopf. Die Status Anzeige leuchtet nun grün und der Pager oder SignWave Empfänger sollte ein Signal an der Taste mit dem Personensymbol empfangen.

Wenn das Licht orange leuchtet, wenn man den Senden Knopf drückt, bedeutet das, dass die interne Batterie schwach ist und ausgetauscht werden sollte. (Siehe Schritt 3).

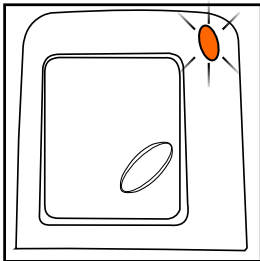


3.

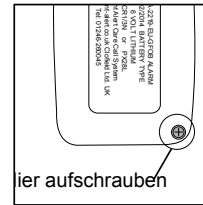

Niedriger Batteriestand

When the battery needs replacing remove the screw from the rear of the unit.

Falls die Batterie ausgetauscht werden muss, drehen Sie die Schraube auf der Rückseite des Gerätes heraus. Drehen Sie das Gerät um und drücken Sie vorsichtig die Batterieabdeckung nach oben, so dass Sie die Batterie und die Kontrollschalter sehen können.


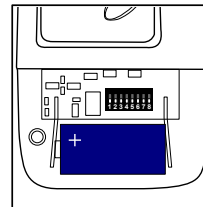


Tauschen Sie die Batterie aus gegen eine 6Volt Lithium Batterie (2CR1/3N oder PX28L) unter Beachtung der Polarität.

CCF3A-2219-EU-GFOB

Erschütterungserkennung einschalten

Die CCF3A-2219-EU-GFOB Variante besitzt einen eingebauten Sensor der auf Erschütterungen reagiert und somit den Alarm am Gerät auslöst.

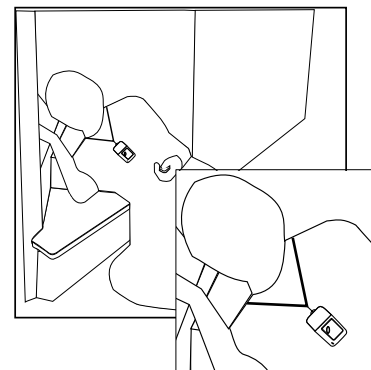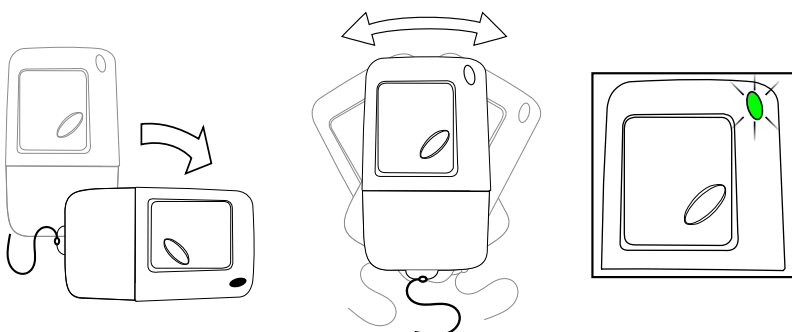

Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten, empfehlen wir die mitgelieferte Umhängekordel um den Hals zu tragen. Durch das Tragen des Senders in der Tasche reduziert sich die Effektivität der Erschütterungserkennung.


Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

Einstellung der Zone

Anmerkung: Falls Sie mehr als einen Personenrufsender benutzen möchten oder einen Sender bereits auf Zone 1 eingestellt haben, kann der Personenrufsender folgendermaßen auf eine andere Zone eingestellt werden:

Der Personenrufsender hat Zone 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den Personenrufsender jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Zone kann durch Schalter 5 – 8 eingestellt werden. Das abgebildete Diagramm zeigt die 12 möglichen Kombinationen.

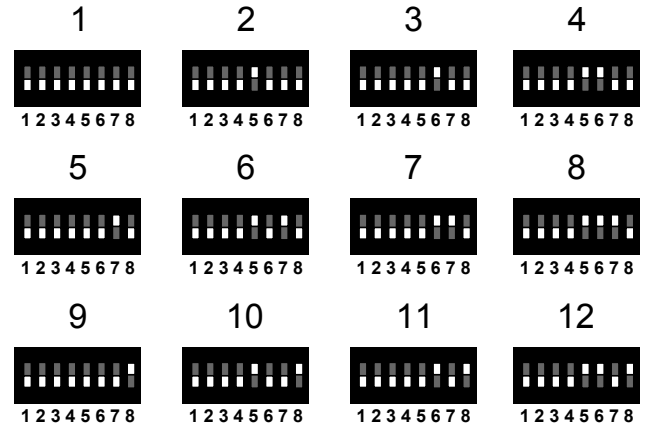

Telecare SignWave Aktivierung

Anmerkung: Die folgenden Einstellungen aktivieren den Standard Care Call Pager & SignWave Empfänger nicht. Nur zur Nutzung mit Care Call CCS3A-2217-EU-TL.

Wenn die Einstellungen so vorgenommen wurden, aktiviert der Personenrufsender nur den Care Call SignWave mit Telecare Verbindung.

Das kann nützlich sein bei der Verwendung eines automatischen Wählers oder einem anderen Gerät eines weiteren Herstellers.



So wechseln Sie den Kanal

Anmerkung: In den meisten Fällen ist es nicht nötig den Kanal zu wechseln. Wenn allerdings ein oder mehrere weitere Care Call Systeme in der Nähe sind, ist es möglich den Kanal (bis zu 16 versch. Kanäle) zu wechseln um Störungen zu verhindern.

Der Sender hat den Kanal 1 voreingestellt und es sind keine Schalter gedrückt. Falls Sie den Sender jemals zurücksetzen müssen, sind das die Fabrik Einstellungen.

Die Kanäle können mit den Schaltern 1-4 eingestellt werden. Die Abbildung zeigt die 16 möglichen Kombinationen.

Stellen Sie sicher dass am Empfänger (Pager oder SignWave) und an allen anderen Sendern des Systems der gleiche Kanal eingestellt ist.

