

Silent Alert Care Call System Präsentation



Kabelloses Alarmierungssystem für Betreuer/innen.
Ideal sowohl als eigenständiges Telecare
Hausrufsystem als auch als
personenbezogenes Warnsystem.

Care Call ist ein Funk Paging System das von Betreuern/innen zuhause und in Pflegeeinrichtungen verwendet wird.



Mit einfachen Handgriffen kann das Care Call System installiert und in Betrieb genommen werden. Dadurch schließt das System die Lücke zwischen Einstiegsrufsystemen für den häuslichen Bereich und teuren Schwesternrufsystemen. Die ideale Lösung zur Betreuung von 1- 12 Personen per Empfänger.



Ideal zur Betreuung von Menschen mit

- ✓ Alzheimer
- ✓ Mobilitätseinschränkungen
- ✓ Sturzgefährdung
- ✓ Neigung zum Umherirren oder Schlafwandeln

Care Call Pager




Ein kleiner Pager wird vom Betreuer/in getragen. Wenn der Pager ein Signal empfängt leuchtet die entsprechende Nummer auf und es piept oder vibriert diskret um den/die Pfleger/in über ein Ereignis zu informieren. Das Gerät wird immer nachts im Care Call Schnelllader aufgeladen.

Der Pager kann auf 12 Sender reagieren und ermöglicht es so dem/der Betreuer/in auch größere Areale oder mehrere Patienten zu beaufsichtigen.

Wenn nachts ein Signal empfangen wird, während der Pager im Ladegerät ist, weckt entweder ein akustisches Signal oder eine vibrierende Kissenunterlage den/die Pfleger/in.



Reichweite

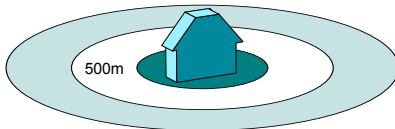

Das Care Call System hat eine Reichweite von bis zu 1000m im Freien



Unaffected by new 4G mobile internet devices

SignWave™ tragbarer Empfänger mit Summer & Blitzlicht Alarmierung



- Einfach zu handhabende Löschtaste
- LED Stroboskoplicht
- Lautstärkeregler
- Hintergrundbeleuchtete Bildschirmanzeige
- Bis zu 1000m Reichweite im Freien
- Einfache Ladestation zum Einlegen des Empfängers


Der SignWave Empfänger besitzt eine hoch intensive LED Stroboskoplicht & 100dB Summer mit verstellbarer Lautstärke. Das Gerät kann irgendwo im Haus platziert werden um den/die Betreuer/in über ein Ereignis zu informieren.

Durch sein ergonomisches Design kann man den SignWave leicht aufnehmen und bedienen und ebenso die große Lösch taste oben am Gerät benutzen.

Damit auch nachts eine diskrete Abdeckung gewährleistet ist, kann man eine vibrierende Kissenunterlage an das Ladegerät anschließen.



Reichweite

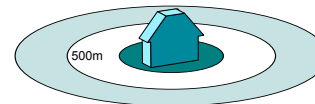

Das Care Call System hat eine Reichweite von bis zu 1000m im Freien



Unaffected by new 4G mobile internet devices

Der Personenrufsender kann dazu benutzt werden eine/n Betreuer/in in einem anderen Teil des Hauses oder der Pflegeeinrichtung anzupiepen.



Ideal bei der Pflege von jemandem der Mobilitätsprobleme hat oder sturzgefährdet ist.

Der Personenrufsender kann mit einer Umhängekordel um den Hals getragen werden. Ein einfacher Knopfdruck alarmiert den/die Betreuer/in.

Der G-FOB Personenrufsender mit Erschütterungserkennung besitzt einen eingebauten Sensor um Stürze zu erkennen. Wenn eine Erschütterung erkannt wird, wird automatisch ein Signal an den/die Betreuer/in gesendet.



Care Call


Mini Magnetischer Türsender



Der Mini Magnetische Türsender sendet ein Signal beim öffnen einer Tür. Ideal um den/ die Betreuer/in darüber zu informieren wann und wo der Patient im Haus herumläuft.

Bis zu 12 Türen können mit Hilfe zusätzlicher Sender überwacht werden.

Der Sender kann mit einer Auslöse Zeitverzögerung von 10, 20 oder 30 Sekunden konfiguriert werden.

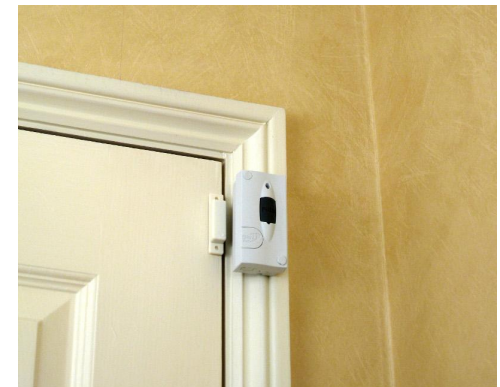

Stuhlaufstehmelder, Bettverlassen- und unter dem Teppich liegende Alarmtrittmattes



Ideal wenn der/die Pfleger/in den Patienten diskret beim Aufstehen von Stuhl oder Bett überwachen möchte.



Der Bewegungsmelder ist für Menschen gedacht die zum Umherirren neigen



Platzieren Sie einfach den Melder im Flur oder neben dem Bett.

Der PIR wird durch Bewegung, Geräusch oder beides ausgelöst.

Wahlweise stehen versch. Rückkehr Zeitverzögerungseinstellungen zur Verfügung um zu verhindern, dass schon ein Toilettengang den Melder auslöst. Falls der Patient nicht innerhalb einer bestimmten festgelegten Zeit zurückkehrt, alarmiert das Gerät den/die Pfleger/in.



Care Call Universal Sender mit Geräuschüberwachung



Der Universal Sender ermöglicht es dem Benutzer einen Raum oder Areal zu überwachen und auf vordefinierte Lautstärkepegel zu reagieren.

Wenn ein Geräusch von entsprechender Lautstärke und Länge vom Sender empfangen wird, sendet er ein Signal an den Pager oder SignWave Empfänger.



Care Call Spezialsender



Unsere Spezialsender sind so angepasst, dass sie sich mit den gängigen Produkten anderer Firmen gut verbinden lassen, so dass sie mit unserem Pager oder SignWave Empfänger überwacht werden können.

Sie können mit folgenden verbunden werden

- EMFIT Epilepsie Überwachungsgerät
- Bettbelegung Überwachungsgerät
- Baby Atmungsüberwachungsgerät



Care Call Rauch- und Kohlenmonoxidmelder




Rauch und Kohlenmonoxidmelder können jedem System hinzugefügt werden um den/die Pfleger/in im Notfall zu alarmieren.

Ionisations- und Optikale (akustische) Melder sind erhältlich.



Zwei versch. Reichweiten sind einstellbar
– 100m sind ausreichend für die meisten
Häuser und Gärten und 1000m innerhalb
einer Pflegeeinrichtung oder wenn ein
Nachbar versorgt werden muss.

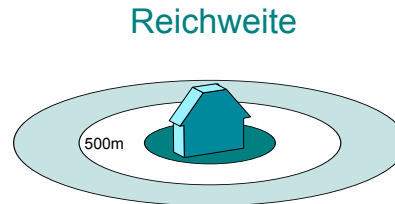

Das Care Call System besitzt eine
Reichweite von bis zu 1000m im Freien

Bis zu 12 Bereiche per Verteilerschlüssel auswählbar

Kostengünstige und einmalige Anschaffungskosten

Kann vom Benutzer selbst installiert werden

1 Jahr volle Garantie

