



Druckauflagen Aktivierung

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an +353 (0)1 247 9007

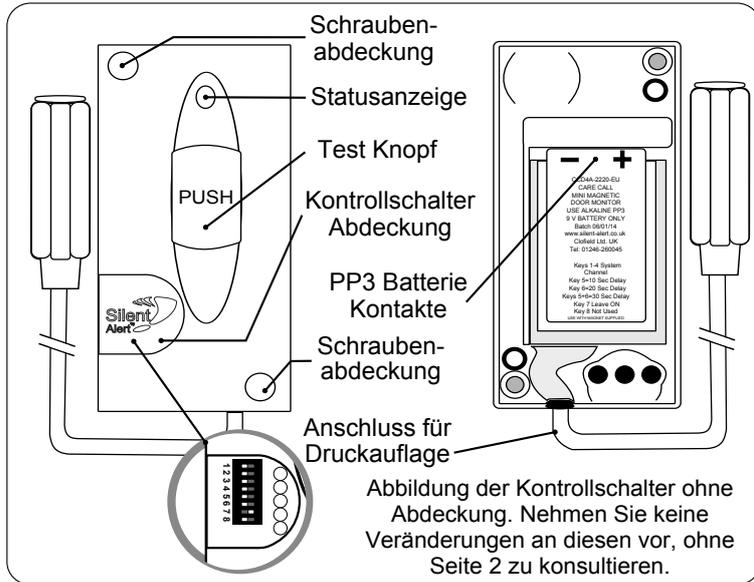

1. Legen Sie eine 9 Volt PP3 Alkali Batterie oder eine Lithium Batterie ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität.

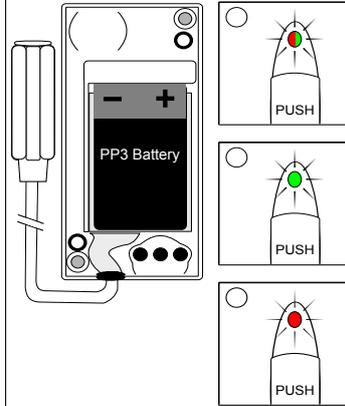

Wenn die Batterie das erste Mal eingelegt wird, blinkt die Statusanzeige einige Male zunächst rot, dann grün.

Daraufhin wird die Anzeige sooft grün blinken, wie die vorhandene Batterie Volt hat.


9mal blinken = 9 Volt in der Batterie

Falls die Statusanzeige zu diesem Zeitpunkt rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie leer ist und ausgetauscht werden muss.

Um den Batterietest zu wiederholen, entfernen Sie die Batterie, drücken Sie den Test Knopf, dann legen Sie die Batterie wieder ein um die Abfolge noch einmal zu sehen.

2. Der Melder wird durch die Druckauflage (PM5) ausgelöst.

Stecken Sie den Stecker der Druckauflage PM5 in die Anschlussstelle am Melder.

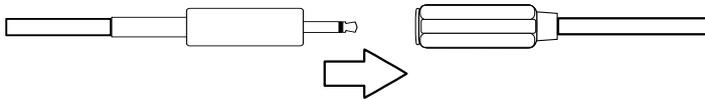


Falls nötig kann diese Verbindung auch zur Sicherheit mit Klebeband umwickelt werden.



Beim ersten Mal, wenn die Verbindung besteht, kann es sein, dass der Alarm ausgelöst wird. Das ist normal.

3. Platzieren Sie die Druckauflage unter dem Stuhlkissen und stellen Sie sicher, dass es nicht abgeknickt oder gefaltet ist.

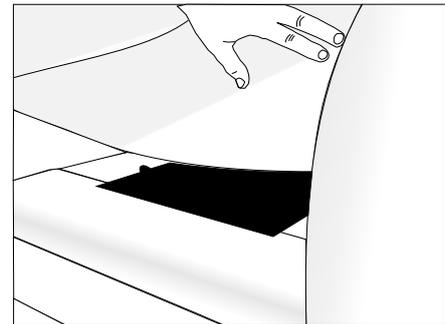

Achten Sie beim Aufbau darauf, dass das Kabel nicht eine Stolperfalle bildet.

4. Wenn der Benutzer vom Stuhl aufsteht, wird ein Signal an den Pager oder SignWave gesendet.

