

Care Call kabelloses Rufsystem für Pflegepersonen



- Kostengünstig
- Einfach zu montieren
- Reichweite im Freien von 100 bis 1000 m
- Von hinten beleuchtetes LED-Display
- Wahlweise vibrierender Pager oder SignWave Summer Empfänger-Tischblitzlampe erhältlich
- Von der Rundfunklizenz ausgenommen



Silent Alert International vertreibt außerdem SA3000 und Fire Safe (Feuerschutz) Systeme



Für weitere Informationen und für den Einkauf online besuchen Sie bitte unsere Website unter

www.silentalert.de

Silent Alert International, 30 Enniskerry Road, Jamestown, Kilternan, Dublin 18, Ireland
Telefon (Englisch und Deutsch):+353 (0)1 247 9007 Fax: +353 (0)1 295 7550
Email:Verkauf und Beratung: info@silentalert.de



Entwickelt & hergestellt in England



ARBEITEN SIE IN EINER PFLEGEEINRICHTUNG ODER BETREUEN SIE JEMANDEN IM EIGENEN ZUHAUSE?

Machen Sie sich und Ihren Patienten das Leben leichter & sicherer

Vorbeugende Überwachung



in der häuslichen Pflege

Silent
Alert
International®

*Unterstützende Technik für
Schwerhörige, Gehörlose und
Pflegebedürftige*

Kabelloses Rufsystem für Pflegepersonal

Was ist das Silent Alert Care Call System?

Care Call ist ein unauffälliges sowie kabelloses Rufsystem für Pflegepersonen. Es bietet eine rasche und vorbeugende Fernüberwachung von Betreuungsbedürftigen zuhause, in einem benachbarten Haus oder in einer Pflegeeinrichtung. Das ermöglicht einer Person für längere Zeit in der vertrauten Umgebung ihres eigenen Zuhauses zu bleiben, während Care Call gleichzeitig der Pflegeperson es erheblich erleichtert auf Notfälle sofort zu reagieren, oder diese gar zu verhindern. So können Pflegepersonen beruhigt und auf kostengünstige Art und Weise eine bessere und schnellere Betreuung anbieten.

Für wen ist das Care Call System geeignet?

Für jede Pflegeperson mit Verantwortung für jemanden mit:

- Alzheimer oder Demenz
- Neigung zum Schlafwandeln
- Neigung zum Hinfallen
- Bewegungseinschränkung
- Lernschwierigkeiten

Wie funktioniert es?

Eine Auswahl unauffälliger, kabelloser Übertragungsgeräte ist erhältlich. Wird ein Übertragungsgerät ausgelöst, sendet es ein Funksignal an den Empfänger, der die Pflegeperson alarmiert. Bis zu zwölf Bereiche (oder Personen) können mit einem tragbaren SignWave Geräusch- und Lichtblitzempfänger oder mit einem Pager überwacht werden. Die Pflegeperson kann anhand des aufleuchtenden numerischen Displays ganz leicht herausfinden, welcher spezifische Bereich oder welche Person den Sensor ausgelöst hat. Dadurch kann sofort und gezielt auf einen Alarmruf reagiert werden und die Möglichkeit vorbeugend einzugreifen wird erhöht. Zwei verschiedene Reichweiten sind möglich: eine Reichweite von 100 m für die Verwendung zuhause und im Garten oder eine größere Reichweite bis zu 1000 m für die Verwendung in einem benachbarten Haus oder einer großen Pflegeeinrichtung.

Produkte rund um die Pflege



Tragbarer SignWave Empfänger und Tischblitzlampe

Der tragbare SignWave Empfänger und Tischblitzlampe mit Lautstärkeregelung, der überall im Haus positioniert werden kann. Nachts befindet sich der SignWave Empfänger in der Ladestation neben dem Bett.



Care Call Pager

Entweder mit Alarmton oder dezenter Vibration kann der Pager am Gürtel oder an einer Umhängekordel um den Hals getragen werden. Der Pager befindet sich abends in einer Ladestation neben dem Bett. Im Alarmfall wird die Pflegeperson durch einen Alarmton verständigt.



1

CCM3A-2216-EU-PIR Bewegungsmelder


Einfach den Bewegungsmelder in der Nähe einer Steckdose an die Wand montieren. Verwenden Sie den Drehpunkt der Achse, um den Bewegungssensor auf den Bereich auszurichten, den Sie überwachen möchten. Der Melder kann entweder im Eingangsbereich nahe einer Treppe, am Übergang zu einem Zimmer oder unten an einem Bett angebracht werden um die Pflegeperson zu alarmieren, sollte der zu Pflegenden sein Bett verlassen.



2

CCF3A-2219-EU Notfall Personentrüfender

Ein einfacher Knopfdruck alarmiert die Pflegeperson. Wahlweise mit Sturzalarmfunktion. (CCF3A-2219-EU-GFOB).

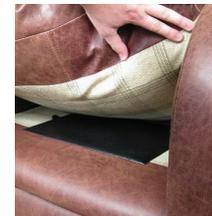

3

CCC4A-2212-EU Druckauflage als Stuhlaufsteh-Melder

Einfach die Druckauflage unter ein Stuhlkissen legen und den Sender anschließen. Jedes Mal wenn sich die Person vom Stuhl erhebt, wird automatisch ein Signal an die Pflegeperson gesendet.



4

CCD4A-2220-EU Mini magnetischer Türsender

Einfach den Sender am Türrahmen befestigen und den Magneten an der Tür. Jedes Mal wenn die Tür geöffnet wird, wird automatisch ein Signal gesendet. Die Sender können an mehreren Türen befestigt werden und so eingestellt werden, dass verschiedene Empfänger alarmiert werden können. Mit Auslöseverzögerung um Fehlalarme zu vermeiden.



5

CCM4A-2214-EU Alarm Trittmatte

Einfach die Druckunterlage unter den Teppich neben dem Bett positionieren und den Sender anschließen. Sobald jemand auf die Druckunterlage steigt, wird automatisch ein Signal gesendet.



6

CCS-SMOKE-ION/OPTO Kabelloser Rauchmelder

Eine Auswahl an optischen und Ionisations Rauchmeldern ist erhältlich, mit hörbarem Summer als unverzichtbarer Feueralarm im häuslichen Umfeld. Ein Kohlenmonoxid-Alarm ist ebenfalls erhältlich. (CCS-CO-Detektor)